



BEAUTY SERVICE
POTENZA

TECNOLOGIE



*“Abbi buona cura
del tuo corpo,
è l'unico posto
in cui devi vivere.”*

Jim Rohn



BEAUTY SERVICE
POTENZA

IL TUO PARTNER
NATURALE

BIONIC HANDS SYSTEM

Unisce i benefici del massaggio alla forza delle tecnologie professionali

PER USO ESTETICO

Stimola i tessuti e veicola principi attivi tramite la radiofrequenza e l'elettrostimolatore.

Ossigena e rigenera mediante il vacuum e la biostimolazione.

Risultati immediati su viso e corpo.

BIONIC HANDS SYSTEM è un dispositivo professionale dal grande impatto visivo, che permette di trattare gli inestetismi del viso e del corpo in modo efficace e duraturo nel tempo.

Il funzionamento del guanto è semplice e intuitivo, in base al trattamento che si desidera effettuare si inseriscono gli appositi ditali, che trasformano le dita in veri e propri manipoli per la stimolazione tessutale e la veicolazione transdermica. Il manipolo corpo, pratico e funzionale, contiene 3 tecnologie che agiscono in modo sinergico: vacuum



per il massaggio endodermico, fotobiostimolazione per la rigenerazione dei tessuti, radiofrequenza per la tonificazione.

Con BIONIC HANDS SYSTEM si possono eseguire molteplici trattamenti, che abbinati a protocolli studiati e prodotti mirati ne potenziano e garantiscono i risultati. Grazie all'unione dei benefici delle tecniche manuali a quelle tecnologiche si possono effettuare trattamenti liftanti, illuminanti, rimpolpanti, drenanti e anticellulite.

Cosmeceutici attivi per ogni inestetismo:

DRY OIL



FOAM RF



PATCH ORO



MASCHERA ORO



CARATTERISTICHE GUANTO:

DURATA TRATTAMENTO	Regolabile da 10 a 30 minuti
TEMPERATURA	LOW - L - bassa, HIGH - H - alta, L+H medio
BIO MODE	P1 - programma INTENSO con emissione costante P2 - programma LEGGERO con emissione pulsata P3 - programma MEDIO con emissione pulsata

CARATTERISTICHE MANIPOLO CORPO:

TEMPERATURA	Regolabile da 1 a 50
ASPIRAZIONE VACUUM	Regolabile da 0 a 6
FOTOBIOSTIMOLAZIONE	Regolabile da 0 a 6


BEAUTY SERVICE
POTENZA



DEA LED REVOLUTION

Ringiovanisci la tua pelle con la luce

PER USO ESTETICO

Attiva il processo di Fotobiostimolazione Luce Led + Nano Spray + Effetto termale. Svolge un'azione anti-age e anti-ossidante. Sfrutta 8 diversi colori per stimolazioni specifiche.

Dea Led Revolution effettua una rivoluzionaria TERAPIA DELLA LUCE, attivando il metabolismo cellulare e combattendo gli inestetismi cutanei in modo naturale, attraverso 7 differenti lunghezze d'onda emanate dalle luci. Funzione HOT & COLD: il calore è ideale per preparare i pori alla pulizia, i nano spray rendono i trattamenti piacevoli e favoriscono l'assorbimento dei principi attivi, l'alternanza dei 2 trattamenti favorisce una ginnastica cutanea che rende la pelle più tonica e compatta.



Le diverse lunghezze d'onda della luce penetrano nella pelle a seconda dei diversi utilizzi:

LUCE ROSSA: Particolarmente indicata per pelli secche e asfittiche. Stimola la produzione di collagene ed elastina, svolgendo un'azione anti-age e anti-ossidante, migliora il microcircolo e aumenta l'elasticità della pelle rendendola più morbida e compatta.

LUCE VERDE: Genera un'azione di ristrutturazione cellulare, migliorando e prevenendo la sensibilità cutanea. Migliora il tono della pelle e dona immediatamente un colorito luminoso.

LUCE BLU: Svolge un'azione anti-infiammatoria e purificante sulla pelle, attivando una funzione batteriostatica e lenitiva, indicata soprattutto in presenza di acne.

LUCE GIALLA: Combina le luci rossa e verde. Migliora

Cosmeceutici attivi per ogni inestetismo:

KIT FOTIOBSTIMOLAZIONE



CLEANSING GEL







notevolmente lo scambio di ossigeno intracellulare e favorisce il sistema linfatico, per un'azione drenante e detossinante.

LUCE VIOLA: Combina le luci rosse e blu. Elimina i batteri che causano l'acne riducendo l'infiammazione facciale e la comparsa di cicatrici legate. È quindi altamente raccomandato per le persone con acne e arrossamento.

LUCE AZZURRA: Combina le luci blu e verdi. Rimuove l'acne e le macchie di pigmento contemporaneamente.

LUCE BIANCA: Combina luci rossa, verde e blu. Avendo una capacità di penetrazione molto alta, viene utilizzata per accelerare il metabolismo cellulare e l'assorbimento dei prodotti.

LUCE UV: Produce effetti di fluorescenza e fosforescenza, risaltando le impurità e rendendole opalescenti e biancastre. È sicura, in quanto si stende solo nel campo degli UVA, senza coinvolgere i campi UVB ed UVC.

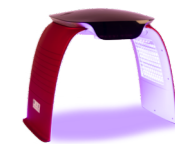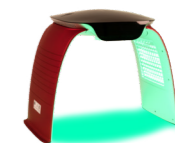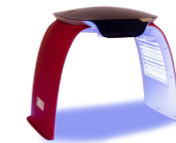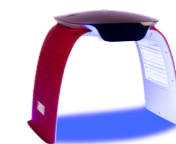

LASER X FUTURE 5.0

Il Laser del Futuro è già presente

PER USO ESTETICO

Laser Diodo 808 - 1200 watt

Laser Diodo 808 - 800 watt

50 MILIONI DI SPOT.

Ultima Tecnologia Laser Diodo.

Più veloce ed efficace.

Sicuro e facile da utilizzare.

LASER X - FUTURE 5.0 è il laser di ultima generazione super efficace per trattamenti di epilazione donna e uomo, su tutte le zone del corpo e del viso adatto a qualsiasi fototipo di pelle e ad ogni tipo di pelo.

LEGGERO, PRATICO, FACILE DA UTILIZZARE. Grazie al suo speciale sistema di raffreddamento e alla tecnologia SLD X - FUTURE 5.0 ha dimensioni contenute ma racchiude la massima potenza disponibile nel settore estetico.

UTILIZZA L'UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO TEC. Un



sistema innovativo che consente un utilizzo continuo nel corso di un'intera giornata.

SISTEMA DIODO LASER CON UN VERO SUPER PULSE.

Un potente micro - processore garantisce un controllo ottimale dell'apparecchio sfruttando al massimo ed in assoluta sicurezza le potenzialità del diodo laser.

Laser Diodo 808 - 1200 watt


ENERGIA IN USCITA DAL MANIPOLO	40J/cm2
FREQUENZA	10 Hz
TIPO DI EMISSIONE	Singolo, ripetuto
DIMENSIONE SPOT	11 x 11 mm
CLASSIFICAZIONE	Laser classe 4
POTENZA DI EMISSIONE DIODO	1200 W
LUNGHEZZA D'ONDA	808 nm
ALIMENTAZIONE	250V 110/60 Hz
RAFFREDDAMENTO	Doppio raffreddamento TEC su cristallo + acqua
DISPLAY	8 " CON DISPLAY A COLORI
PESO	16 KG
DIMENSIONI (cm)	41.5 x 38.5 x 23 cm

Laser Diodo 808 - 800 watt.

ENERGIA IN USCITA DAL MANIPOLO	40J/cm2
FREQUENZA	10 Hz
TIPO DI EMISSIONE	Singolo, ripetuto
DIMENSIONE SPOT	11 x 11 mm
POTENZA DI EMISSIONE DIODO	800 W
LUNGHEZZA D'ONDA	808 nm
ALIMENTAZIONE	250V 110/60 Hz
RAFFREDDAMENTO	TEC su cristallo + acqua
DISPLAY	8 " CON DISPLAY A COLORI
PESO	16 KG
DIMENSIONI (cm)	41.5 x 38.5 x 23 cm



BEAUTY SERVICE
POTENZA

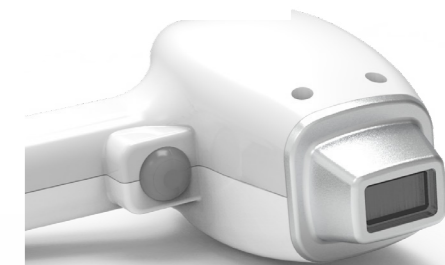

LIPONATUR

Rimodella la tua Silhouette

PER USO ESTETICO

Combatte la Cellulite.
Rimodella la Silhouette.
Tonifica.
Rilassa.
Sicuro e non invasivo.



L'alternativa alla liposuzione, per eliminare i cuscinetti adiposi e rimodellare il corpo in maniera naturale.

LipoNatur è un laser a basso livello di energia che crea un segnale chimico nelle cellule adipose, e aiuta il metabolismo a trasformare l'adipe in energia per essere riutilizzata o espulsa dal corpo attraverso le naturali funzioni fisiologiche.

LipoNatur è un laser a bassa potenza che agisce ad una lunghezza d'onda di 760 nanometri senza essere invasivo e crea dei pori transitori in ogni cellula adiposa. Il poro non danneggia la cellula ma permette la fuoriuscita del grasso e dell'acqua. Durante il trattamento saranno stimulate milioni di cellule adipose, le cui dimensioni si ridurranno esponenzialmente.

POTENZA ASSORTITA DALLA RETE	240 VA
DIMENSIONI ESTERNE	41.5 x 38.5 x 23
PESO	16 kg
LUNGHEZZA D'ONDA LASER	760 Nm
POTENZA DI EMISSIONE IN USCITA	impulso continuo o modulare
FREQUENZA NOMINALE DEI DIODI IN USCITA	1 Hz 1000 Hz
PIASTRE GRANDI	8 con 8 diodi cad
PIASTRE PICCOLE	2 con 1 diodo cad
POTENZA SPECIFICA DIODI	130 mW singola uscita
TEMPO DI EMISSIONE	massimo 20 minuti
MONITOR	8 " touch screen a colori



NATUR ANALYZER

PER USO ESTETICO

Chek-up preciso e veloce.

Analizza lo stato di salute della tua pelle.

Visualizza dettagli invisibili a occhio nudo.



NATUR ANALYZER permette di effettuare un check-up approfondito della pelle del viso, grazie alla sua microcamera professionale con lente di ingrandimento e luce LED, UV e WOOD.

Questa tecnologia aiuta a studiare il tessuto cutaneo, individuando le caratteristiche e gli inestetismi da trattare. Tenendo monitorato il miglioramento della pelle durante i trattamenti, si ha la possibilità di dimostrare in modo tangibile i risultati ottenuti.

Attraverso il touch screen è possibile:

- inserire più anagrafiche clienti;
- inserire la propria linea cosmeceutica;
- salvare di volta in volta i check-up effettuati;
- inserire la propria valutazione finale per ogni cliente

MICROCAMERA	Dotata di lenti di ingrandimento e luci LED, UV e WOOD
TIPI DI ANALISI DELLA PELLE	90% minimo
SCHERMO TOUCH	860 1060 hpa
TIPI DI ANALISI DELLA PELLE	Idratazione Elasticità Film idrolipidico Controllo cheratosi Sensibilità della pelle Controllo pigmentazione Tonicità Pori ostruiti
SCHERMO TOUCH	Monitor da 10"
MEMORIA DI ARCHIVIAZIONE	8 Gb espandibili
POTENZA	25 W
ALIMENTAZIONE	AC 110-240V
DIMENSIONI	25x18x12 cm



NATUR PRESS

PER USO ESTETICO

Ideale per riattivare la circolazione e combattere la cellulite.

Favorisce il sistema circolatorio, venoso e linfatico.

Riduce i gonfiori ed allevia i dolori

La pressoterapia professionale o presso massaggio estetico, si basa sulla pressione di determinate zone del corpo ed è efficace contro gli inestetismi della cellulite e della ritenzione idrica. Quando si parla di pressoterapia ci si riferisce ad una tecnica utilizzata in estetica per facilitare l'eliminazione di liquidi e tossine dal corpo in modo naturale, un vero e proprio trattamento di benessere che migliora le funzioni del sistema circolatorio e linfatico. Questo trattamento è paragonabile ad una sorta di massaggio linfodrenante, ma più complesso e mirato. In effetti, è una tecnica drenante finalizzata a contrastare la ritenzione idrica e a favorire il flusso della linfa nei vasi.

In ambito estetico, è un'ottima alleata per:

- Eliminare le tossine e migliorare l'aspetto della cute
- Snellire addome, braccia e cosce
- Combattere la cellulite e i suoi inestetismi
- Ridefinire gambeglutei

Il beneficio più immediato è la sensazione di piacevole leggerezza e rilassatezza.

PROGRAMMA A Massaggio leggero per riscaldamento

PROGRAMMA B Massaggio profondo e intensivo

PROGRAMMA C Massaggio molto profondo e molto intensivo

PROGRAMMA D Massaggio Relax

VESCICHE GONFIABILI	20
FORZA DI PRESSIONE	0.4 kg per cm quadrato
DISPLAY	7 pollici
POTENZA	350 Watt
PESO	15kg
MISURE	41 x 38 x 23 cm



NATUR PRESS IR

Con Infrarossi ed Elettrostimolatore

PER USO ESTETICO

Favorisce il sistema circolatorio, venoso e linfatico.
Con il sistema infrarossi favorisce la riduzione della cellulite.
Riduce i gonfiori ed allevia i dolori.
Tonifica e Rimodella la silhouette.

La pressoterapia o presso massaggio estetico con infrarossi ed elettrostimolazione si basa sulla pressione esterna esercitata da un dispositivo che si posiziona su arti, addome e fianchi, al fine di migliorare la funzionalità della circolazione venoso-linfatica, soprattutto negli arti inferiori. Svolge un'attività drenante, di conseguenza disintossica e riduce eventuali stasi edematose su caviglie e ginocchia.

Migliorando la circolazione sanguigna, incrementa l'apporto di ossigeno sui tessuti necessario per un rinnovamento cellulare, inoltre generando un piacevole calore, rilassa i muscoli e la mente.

PROGRAMMA A Massaggio leggero per riscalda-

mento

PROGRAMMA B Massaggio profondo e intensivo

PROGRAMMA C Massaggio molto profondo e molto intensivo

PROGRAMMA D Massaggio Relax

Gli Infrarossi agiscono riscaldando quelle zone dove si accumula più facilmente il grasso e la cellulite, favorendone il riassorbimento e rendendo la cute più levigata laddove è presente la classica "buccia d'arancia". L'elettrostimolazione aumenta la tonicità muscolare e l'elasticità cutanea, migliora il metabolismo e favorisce il riassorbimento dei grassi in eccesso. La sinergia di questi 3 trattamenti consente di ottenere eccellenti risultati con una sola apparecchiatura.

VESCICHE GONFIABILI	20
FORZA DI PRESSIONE	0.4 kg per cm quadrato
INFRAROSSI	7 zone
EMS	Si (ElettroStimolazione)
TEMPERATURA IR	0-65 DC
POTENZA	350 Watt
DISPLAY	7 pollici
PESO	15kg
MISURE	41 x 38 x 23 cm



NATUR SHAPE

PER USO ESTETICO

Trattamenti Viso.
Dimagrimento Corpo.
Anticellulite Body Sculpting.

NATUR SHAPE nasce dalla sinergia di 5 metodi che all'avanguardia che hanno l'obiettivo di combattere gli inestetismi di viso e corpo garantendo risultati visibili già dalle prime sedute.

1. VACUUM per massaggio aspirato che stimola il flusso sanguigno sui tessuti superficiali favorendo l'eliminazione delle tossine e la riduzione delle cellule adipose localizzate
2. RF agisce sulla microcircolazione sanguigna stimolando il metabolismo cellulare
3. ROLLER effettuano un massaggio rotatorio con 4 diverse velocità



4. LED stimola il tessuto sottocutaneo evitando gli avvallamenti
 5. INFRAROSSI stimolano l'apporto sanguigno localizzato durante l'esecuzione del massaggio con la vacuum
- TRATTAMENTI VISO**

Vacuum + RF: per il contorno occhi, borse oculari
Vacuum + RF + LED: per il lifting viso, anti-rughe e ringiovanimento

TRATTAMENTI CORPO

Vacuum + Roller + RF + LED + IR: per fianchi, schiena e cosce
Vacuum + Roller + RF + LED: per piccole zone come braccia e gambe

ENERGIA MASSIMA	1000W
ASPIRAZIONE VACUUM	40-90Kpa (regolabile)
POTENZA RF	Max.50W
FREQUENZA RF	da 0,4 a 1,5 Mhz
VELOCITÀ MASSIMA RULLI MANIPOLO 1 E 2	120RPM
DIREZIONE ROTAZIONE RULLI MANIPOLO 1 E 2	4 combinazioni regolabili
TENSIONE DI RETE	220V+10%,50/60Hz
POTENZA INFRAROSSI MANIPOLO 1 E 2	Max.10W
LUNGHEZZA D'ONDA INFRAROSSI MANIPOLO 1 E 2	940nm
LUNGHEZZA D'ONDA LUCE LED MANIPOLI 3 E 4	650nm SW
DISPLAY	10" a colori con touch screen
RAFFREDDAMENTO	Aria
DIMENSIONI/CM	56 x 47 x 110 (L x W x H)
PESO	51kg



NATUR SLIM BODY SPHERE

6 Azioni in una sola tecnologia

PER USO ESTETICO

Trattamenti viso e corpo.
Elimina i centimetri di troppo.
Riduce le rughe.
Compatta i tessuti.

Natur Slim Body Sphere è l'apparecchiatura estetica più completa e innovativa: le sue 6 tecnologie permettono di trattare gli inestetismi di viso e corpo in modo mirato e indolore, permettendo di rispondere ad ampie richieste e diverse esigenze. Ha 4 differenti manipoli corpo, a seconda del tipo di trattamento che si ha intenzione di effettuare. I 2 manipoli roller, con doppi rulli a movimento indipendente e quattro modalità di rotazione differente, agiscono contemporaneamente a vacuum, rf e fotobiostimolazione, permettendo un massaggio profondo ed efficace che modella e snellisce il corpo. Il manipolo ultrasuoni è un ottimo alleato contro le cellule adipose, la vascolarizzazione e l'ossi-



genazione dei tessuti, permette la disgregazione degli adipociti, con conseguente liberazione dei grassi in esso contenuti.

Il nuovissimo manipolo roteante con sfere in morbido silicone è un perfetto alleato per il trattamento della cellulite in tutti i suoi stadi. Le sfere esercitano una serie di movimenti rapidi trasmessi ai tessuti con una successione di microcompressioni e microvibrazioni, effettuando una sorta di ginnastica vascolare piacevole e non invasiva.

I 2 manipoli dedicati al viso svolgono un'importante azione anti-age: Vacuum, Radiofrequenza e Fotobiostimolazione, accelerano la produzione di collagene, elastina e acido ialuronico, donando una pelle più giovane e compatta.

Un ampio touch screen e un software intuitivo consentono di scegliere il trattamento più efficace e grazie ai protocolli in abbinamento si avranno risultati garantiti fin dalle prime sedute.

MANIPOLO ROLLER

Aspirazione Vacuum	0-85Kpa (regolabile)
Velocità rotazione rulli	40r/min
Potenza RF	60W
Frequenza RF	2 MHz
Frequenza RF	Frequenza RF

MANIPOLO VISO E MANIPOLO CONTORNO OCCHI

Aspirazione Vacuum	0-85Kpa (regolabile)
Potenza RF	20W
Frequenza RF	2 MHz
Lunghezza d'onda led rosso	480nm
Frequenza RF	Frequenza RF

MANIPOLO SFERE

Velocità manipoli	675 rmp
Velocità rulli	40-254 Hz
Display	10" a colori con touch screen
Raffreddamento	Aria
Dimensioni	115 x 63 x 72 cm (h x l x p)



BEAUTY SERVICE
POTENZA



DERMAPEN

Rigenera nuova elastina e collagene in modo naturale

PER USO ESTETICO

Favorisce la veicolazione dei principi attivi.
Previene e corregge macchie, rughe ed esiti cicatriziali.
Protocolli studiati per potenziarne i risultati.



DERMAPEN è un dispositivo ad uso professionale per microneedling dotata di una testina di finissimi aghi che, effettuando movimenti verticali ripetitivi generano microcanali, favorendo il passaggio dei principi attivi nel mesoderma e agendo sull'ineestetismo in modo efficace, sicuro e indolore. Leggero, pratico e semplice da utilizzare, è possibile modificare la frequenza di contatto e la lunghezza degli aghi in base agli inestetismi e alle caratteristiche della pelle della propria cliente.

Tramite il pulsante posto sul dispositivo si possono selezionare 5 velocità:

Verde: 8000 RPM

Ciano: 10000 RPM

Blu cielo: 12000 RPM

Rosa: 16000 RPM

Rosso: 18000 RPM

Ruotando la ghiera situata sotto la testina monouso è possibile variare la profondità di utilizzo del dispositivo da 0.25 a 3 mm. In seguito alla formazione di centinaia di micro canali, i principi attivi penetrano fino agli strati più profondi del derma ottenendo risultati immediati nel trattamento delle rughe, occhiaie, irregolarità del viso e del contorno occhi.

Cosmeceutici attivi per ogni inestetismo:

LIFTING SERUM

DECONTRACT SERUM

YALURONIC SERUM



BATTERIA	Litio
DURATA BATTERIA	Fino a 3 ore
RICARICA	tramite cavo USB in dotazione
AGHI IN DOTAZIONE	2 nanoaghi
MISURE	17.5 x 12.8 x 5.8 cm



EYE BEAUTY SYSTEM

PER USO ESTETICO

Migliora gli inestetismi del contorno occhi.
Diminuisce visivamente le occhiaie.
Idrata, rimpolpa e dona luminosità alla pelle.
Dona un effetto lifting immediato.



Utilizza il principio della radiofrequenza per rilevare in modo preciso ed efficace la temperatura dell'epidermide, del derma e dello strato di tessuto sottocutaneo. Attraverso l'uso di frequenze elettromagnetiche emanate da patch elettronici, l'energia arriva sottocute sotto forma di calore stimolando la ricostituzione di nuovo collagene e la riattivazione del microcircolo migliorando di conseguenza il metabolismo cellulare.

Principi attivi dei patch:

Polymer Hydrogels, Collagen, HA

ANTI-ETÀ:

Azione liftante e rimpolpante per lenire la pelle e distendere le rughe sotto gli occhi

DRENA:

Riduce il gonfiore attenuando occhiaie e linee sottili

ALLEVIA LA FATICA:

Migliora la secchezza l'affaticamento degli occhi.

ALIMENTAZIONE	AC 100-240V 50-60 HZ
POTENZA MASSIMA ASSORBITA	50 W
POTENZA MASSIMA DI USCITA	30 W
ENERGIA IN USCITA DAI PATCH ELETTRONICI	0-20 J
DURATA TRATTAMENTI	DA 5 A 30 MIN.
ACCESSORI	PATCH ELETTRONICI
DIMENSIONI (CM)	30 X 29.5 X 12.5
PESO	4 kg



NATUR CRIO FIT

PER USO ESTETICO

3 tecnologie in 1.

Sistema integrato che unisce biostimolazione, effetto cross-fit e freddo localizzato, favorendo lo snellimento della silhouette.

NATUR CRIO FIT è costituito da tre dispositivi integrati per il trattamento della cellulite a 360°:

Elettrodi Fitness

Fascia Ipotermica

Guanti Biostimolanti

Gli elettrodi provocano stimoli a bassa intensità per accelerare il drenaggio e aumentare la capillarizzazione nelle aree cellulitiche. Il moto anaerobico indotto, produce un elevato effetto drenante che può essere rapidamente incrementato da stimoli elettrici sinusoidali a bassa intensità, generando una diffusa ginnastica vascolare. Le aree affette da cellulite subiscono un benefico aumento circolatorio, che favorisce il prelievo dei grassi



cellulari generato dalla sezione di induzione anaerobica.

La fascia criogenica riduce la temperatura nell'area di applicazione, favorendo un'ulteriore ossidazione dei grassi.

I guanti biostimolanti creano micro contrazioni e micro rilassamenti che conducono in pochi minuti uno stato di riposo muscolare, favorendo il recupero e la riorganizzazione delle fibre di tutto il corpo.

Produce dimagrimento e tonificazione muscolare grazie a:

- Esercizio anaerobico potente e confortevole generato dagli elettrodi che lavorano direttamente sul muscolo.
- Infusione del freddo controllato, per la riduzione del tessuto adiposo e della cellulite.
- Il massaggio effettuato con i guanti agisce direttamente sull'inetetismo, assicurando un risultato immediato e duraturo.

ALIMENTAZIONE	230VAC 50/60Hz +/-10%
POTENZA ASSORBITA	100VA
CLASSIFICAZIONE	Tipo BF
FREQUENZA DI STIMOLAZIONE	2.000Hz a 5.000Hz / step da 100Hz
GUANTI BIOSTIMOLANTI	1.5mA/cm ² max
FASCIA IPOTERMICA	2 trasduttori a temperatura regolabile
NUMERO CANALI DI USCITA	12 con 24 elettrodi
MONITOR	Touch screen 7"
DIMENSIONI	112 x 63 x 62 cm (h x l x p)



NATUR MESO LIFT

Rigenera la pelle stimolandola in profondità

PER USO ESTETICO

Favorisce la veicolazione dei principi attivi.
Efficace fin dalla prima seduta.
Sicuro e indolore.



NATUR MESO LIFT è un'avanzata tecnologia di veicolazione dei principi attivi per il trattamento degli inestetismi cutanei, che sfrutta l'energia della radiofrequenza e l'efficacia della tecnologia a microchip con massaggio picchiettante.

Questo tipo di massaggio effettuato da un microchip transdermico monouso, caratterizzato da 25 punti di contatto, permette di stimolare il microcircolo e di accelerare il metabolismo cellulare, aumentando la creazione di collagene per una pelle visibilmente più idratata, elastica e luminosa. Un'apposita siringa spinge il preparato verso la testina monouso che, attraverso i molteplici punti

di contatto con la pelle, polarizza direttamente il prodotto nell'istante in cui viene veicolato, generando un migliore assorbimento in profondità dei principi attivi, che vengono sintetizzati dall'azione della radiofrequenza.

La perfetta combinazione fra queste 2 tecnologie permette di superare lo strato cutaneo, favorendo il passaggio dei principi attivi del mesoderma attraverso un canale diretto ultrasottile e di agire quindi sull'inestetismo in modo efficace, sicuro e indolore.

Leggero, pratico e semplice da utilizzare; attraverso il touch screen è possibile modificare la frequenza di contatto, la quantità di prodotto erogata e l'emissione di calore della radiofrequenza, in base agli inestetismi e alle caratteristiche della pelle della propria cliente.

Cosmeceutici attivi per ogni inestetismo:

LIFTING SERUM

DECONTRACT SERUM

YALURONIC SERUM



FREQUENZA	Regolabile da 2 a 4 MHz
VELOCITÀ PULSAZIONI	Da 100 a 600 puls/min
TENSIONE ALIMENTAZIONE	100 -120 V/ 220-240 V 50/60 Hz
MONITOR	Touch screen 7"



NATUR THERMO SLIM

Rimodella la tua Silhouette

PER USO ESTETICO

Riscaldante, snellente, riducente.

Attiva il processo di riduzione dell'adipe tramite il calore.

Migliora la tonicità e l'elasticità della pelle.

Termofasce pratiche, lavabili e igieniche.

Apparecchiatura elettro-estetica ad uso professionale, studiata per il trattamento dell'adipe localizzato a mezzo di fasce riscaldanti.

Rispetta la fisiologia dei tessuti, agendo in modo diretto ed indiretto sulla circolazione sanguigna e sui grassi.

L'applicazione localizzata delle termofasce favorisce l'accelerazione del metabolismo, con conseguente azione snellente e migliorando al contempo il trofismo dei tessuti. La temperatura di lavoro di ogni fascia, impostabile dall'operatore tra i 25°C e 48°C, è gestita automaticamente da un circuito elettronico computerizzato e garantisce in ogni momento la massima efficacia e piacevolezza.

Il kit comprende fasce riscaldanti in PVC con chiusura in velcro, facili e rapide da indossare.

Grazie ai suoi 9 programmi:

Tonifica

Rassoda

Brucia i grassi

Riattiva la circolazione

Elimina le tossine dal corpo



MODELLO	WRM01
POTENZA DI EMISSIONE IN USCITA	90W max per canale
POTENZA ASSORTITA DALLA RETE	400VA
ALIMENTAZIONE	230VAC 50/60Hz +/-10%
CLASSIFICAZIONE	Tipo BF
FUSIBILI ESTERNI	n°2 x 5A
DIMENSIONI ESTERNE	40 x 33 x 37cm
PESO	18 kg



PERFECT EYES

“Gli occhi sono lo specchio dell’anima”
Prendiamoci sempre cura
del nostro sguardo.

PERFECT EYES nasce come dispositivo specifico mirato a trattare la zona periorbitale, in abbinamento ad un protocollo che combina l'uso di prodotti in sinergia con il pressomassaggio. Studiato principalmente per le pelli mature, può essere tranquillamente usato anche su pelli giovani o semplicemente come trattamento rilassante dopo un'intensa giornata.

È possibile trattare: Zampe di Gallina, Rughe, Microcircolo alterato, Occhiaie, Borse, Palpebra cadente che possono accentuare i segni del tempo.

Il dispositivo, indossato come una maschera, svolge un'azione di pressomassaggio, mirato a ridare freschezza e vitalità allo sguardo.

Durante il trattamento viene sprigionato un leggero calore che abbinato alla musica rilassante, è in grado di dare sollievo alle tensioni muscolari della fronte e delle tempie, donando un aspetto riposato.

L'azione mirata della pressoterapia riattiva il microcircolo favorendo il drenaggio dei liquidi, svuotando la sacca lacrimale e migliorando le borse periorbitali; inoltre il microcircolo attivo permette una maggiore ossigenazione dei tessuti e la conseguente riduzione delle occhiaie. Perfect Eyes dona risultati sorprendenti in abbinamento alla nostra linea di prodotti Senza Rughe.



MODALITÀ DI UTILIZZO	Soft Strong
MODALITÀ SOFT	Durata 7,5 minuti pressione e calore, in abbinamento alla musica
MODALITÀ STRONG	Durata 7,5 minuti pressione/vibrazione e calore, in abbinamento alla musica
MUSICA	intercambiabile tramite chiavetta USB
CAPACITÀ BATTERIE	1000mAh
ALIMENTAZIONE	DC 5V 1A
POTENZA	5W
DIMENSIONI	22 x 10cm



RF & FREEZE BEAUTY

L'alternanza caldo/freddo
per il nutrimento e
il rafforzamento della pelle

PER USO ESTETICO

Idrata, rimpolpa e dona luminosità alla pelle
Riduce le rughe e compatta i tessuti
Leggero, pratico e semplice da utilizzare



RF & FREEZE BEAUTY utilizza la radiofrequenza bipolare e l'innovativo elemento crio, per un trattamento specifico di attenuazione delle rughe e recupero dell'elasticità cutanea.

Il calore della radiofrequenza stimola la circolazione sanguigna e linfatica, ossigenando i tessuti e permettendo un migliore assorbimento in profondità dei principi attivi dei prodotti, scelti in base al trattamento da effettuare.

L'elemento crio viene utilizzato per un raffreddamento controllato dei tessuti: abbassando la temperatura superficiale si crea una vasocostrizione a cui segue una vasodilatazione riflessa, stimolando così l'afflusso sanguigno e permettendo l'eliminazione degli arrossamenti, la riduzione della sensibilità e un miglioramento generale del tono della pelle. Il freddo, inoltre, permette di sigillare all'interno degli strati cutanei più profondi i principi attivi veicolati con la radiofrequenza.

L'effetto CRIO risulta molto **utile anche per completare i trattamenti anti cellulite.**

Le 2 tecnologie non possono essere azionate contemporaneamente, ma gestite singolarmente utilizzando il display o direttamente dal manipolo.

Cosmeceutici attivi per ogni inestetismo:

RF FOAM



CLEANSING GEL



DURATA TRATTAMENTO	Da 30 a 90 minuti
IMPOSTAZIONE RF	Da 0 a 20
IMPOSTAZIONE CRIO	Da 0 a 4
ALIMENTAZIONE	230VAC 50/60Hz +/-10%



RF BEAUTY 5.0

PER USO ESTETICO

Stimola la produzione di collagene.
Riduce gli inestetismi della cellulite e dell'adipe localizzato.
Ringiovanisce e rimodella i tessuti di viso e corpo.



RF BEAUTY 5.0 è una tecnologia concepita con diverse modalità di erogazione: **Radiofrequenza Bipolare, Resistiva e Frazionata**, caratteristiche che la differenziano nel panorama delle tecnologie similari per potenza e prestazioni sul ringiovanimento del tessuto, stimolazione del collagene, veicolazione transdermica dei principi attivi, trattamenti per l'adipe localizzato e di tutti gli stadi della cellulite.

La **Radiofrequenza** è una metodica utilizzata per contrastare i segni dell'invecchiamento cutaneo, la perdita di tono e la comparsa di rughe.

Il trattamento, indolore e non invasivo, consente di ottenere un miglioramento della pelle del corpo e del viso, attenuando con una certa stabilità i principali inestetismi che la riguardano.

Si basa sull'emissione di onde elettromagnetiche che inducono calore all'interno dei tessuti cutanei, diffondendosi dalla superficie fino in profondità nel derma e nel tessuto adiposo; l'effetto biologico di tale calore provoca la contrazione delle fibre di collagene nel tessuto connettivo, favorendo il compattamento della pelle e il rimodellamento cutaneo.

I risultati di RF BEAUTY 5.0 sono visibili fin dalla prima seduta e i progressi conseguiti rimangono nel tempo.



MANIPOLI	1 corpo 1 viso
ELETTRODI INTERCAMBIABILI	4 RING: 4 piastre circolari per un'emissione morbida e diffusa 2 SFERE: ideale per rughe e smagliature 3 ROLLER: ideale per la veicolazione 2 CHIODATO: ideale per una stimolazione intensa del tessuto
TENSIONE DI RETE	230V/50Hz
CLASSIFICAZIONE	Direttiva 93/42/CEE classe IIA
INTERFACCIA UTENTE	Touch screen 50DPI
POTENZA USCITA MASSIMA	25/50 W
FREQUENZA	50-60 Hz
CLASSE DI RISCHIO ELETTRICO	EN 60601-1 Classe I, parte applicata tipo B
PESO	15 kg
MISURE	41.5x38.5x23 cm





BEAUTY SERVICE
POTENZA



BEAUTY SERVICE
POTENZA

IL TUO PARTNER
NATURALE





BEAUTY SERVICE
POTENZA

Via Isca del Pioppo, 21 Potenza PZ

Tel.: +39 0971 1970081

WhatsApp: +39 331 715 7658

info@beautyservicepotenza.it

WWW.BEAUTYSERVICEPOTENZA.IT